

SINAPI

urimètre

Urimètre de Haute Qualité avec contenant 500ml, grand sac et robinet rotationnel antibactérien

REF **SUM500V2**


CONTENU:
1x 2000ml Sac de Drainage connecté à l'Urimètre de 500ml

MODE D'EMPLOI

1. Pour accrocher le compteur: Utilisez les crochets pour accrocher sur le cadre de lit.
2. Échantillonnage de l'urine du contenant: FIG (1) Tournez le robinet vers la gauche pour ouvrir. Tournez vers la droite pour fermer. Fixez la seringue à barrure si nécessaire.
3. Pour vider le contenant dans le sac: FIG (2). Tenez le fond du contenant et inclinez doucement en position horizontale.
4. Pour vider le sac: FIG (3) Tournez le robinet du sac vers la gauche pour ouvrir. Tournez vers la droite pour fermer.
5. Échantillonnage de l'urine du connecteur de cathéter: FIG (4) Nettoyez la surface du port avec antiseptique. Insérez la seringue sans aiguille dans le port. Obetez l'échantillon et retirez la seringue.

ATTENTION/PRECAUTION: Aiguilles conventionnelles et canules émoussées ne sont pas recommandées et peuvent endommager le port sans aiguille.

Remarque: Les volumes de l'appareil sont approximatifs.

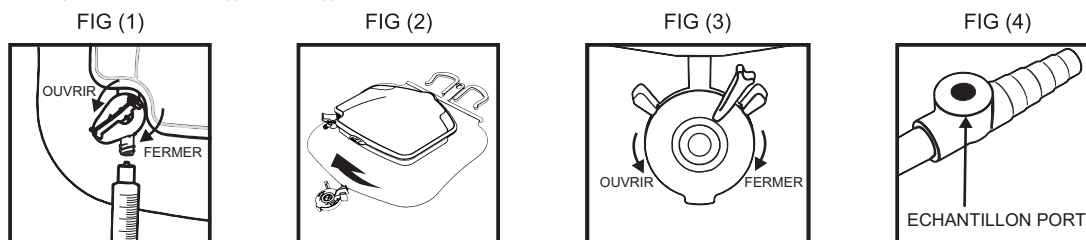

ATTENTION: la législation fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que par un médecin ou sur prescription médicale.

CE
1639

STERILE EO

EC REP

mdi Europa GmbH Langenhagener Str. 71 D-30855 Hannover-Langenhagen



SINAPI biomedical (Pty) Ltd.
ARC Infruitec North Campus
Lelie Road, Stellenbosch, 7600, South Africa
Tel: +27 21 887 5260 Fax: +27 21 887 3059
email: sales@sinapibiomedical.com

Use by


LOT



Sans latex



DEHP
Sans Diéthylhexyl
Phtalate

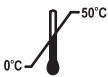

Ne pas exposer à des températures extrêmes



Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert ou endommagé



À usage unique



Consulter le mode d'emploi



Strictement à usage unique. La fonctionnalité et la stérilité seront grandement compromises sinon. Risques d'infection.